



# Blood Bank Processing Solutions

## DP-2065R PLUS



Calidad ISO 9001/13485  
ANMAT: PM1532-1

📍 Calle 34 (Ex Francia) N° 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.  
☎ 4755-7780 / 4755-4004 📞 11 2488 7703  
🌐 [www.presvac.net](http://www.presvac.net) ✉ [presvac@presvac.net](mailto:presvac@presvac.net)





La **centrífuga refrigerada DP-2065 R PLUS**, es un equipo de alta capacidad diseñado para el procesamiento intensivo en bancos de sangre y centros de hemoterapia. Su rotor admite hasta **6 bolsas de sangre** (dobles, triples o cuádruples) con porta bolsas de **1000 ml**, y alcanza una velocidad máxima de **3500 RPM**, lo que garantiza eficiencia y confiabilidad en la separación de componentes.

El sistema de control **MEMOSOFT V** permite programar hasta **50 protocolos diferentes**, con ajuste preciso de **velocidad, temperatura, tiempo, aceleración y frenado**.

La centrífuga dispone de **múltiples sistemas de seguridad**, entre ellos: cierre de tapa, detección y parada inmediata por desbalanceo con alarmas ópticas y sonoras, motor de inducción sin carbones (de bajo mantenimiento) y sistema de refrigeración libre de CFC.

Accesorio opcional: **lector de código de barras con conexión a PC mediante cable RS-232**. Permite registrar fecha, hora, método y duración de cada centrifugación mediante software, garantizando la trazabilidad del proceso

## Seguridad Mejorada



### Detección y parada inmediata por desequilibrio

Ofrece detección en tiempo real del desequilibrio, con parada instantánea para proteger el equipo y las muestras frente a desbalances.



### Bloqueo de tapa antivibraciones

Evita aperturas accidentales durante la operación, asegurando la integridad de la muestra y la seguridad del operador.



### Sistema de alarma integral

Cuenta con un sistema de alarma multifacético para voltaje anormal, alta temperatura, exceso de velocidad, desequilibrio de carga, ausencia del rotor, anomalías del freno y fallas del motor.



### Conectividad de alta calidad

Equipado con un conector de 220 V 50/60 Hz para un uso fácil, rápido y seguro.



### Construcción robusta

Estructura de chapa de acero con pintura epoxi y cámara de acero inoxidable que proporciona durabilidad y seguridad.



### Cámara y contratapa totalmente en acero inoxidable

Ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión, garantizando una larga vida útil.



### Apertura de emergencia

Permite abrir manualmente la tapa en caso de emergencia o pérdida de energía.



## Características destacadas de la centrífuga de 6 bolsas

- **Capacidad de programación ampliada**

Optimice la operatividad del equipo gracias a una memoria integrada con capacidad para almacenar más de 50 programas personalizados, ideal para estandarizar y automatizar procedimientos complejos en entornos de alta demanda.

- **Eficiencia térmica avanzada**

Alcance una rápida temperatura de trabajo desde condiciones ambientales, garantizando rapidez en la puesta en marcha y eficiencia en la preparación de procesos sensibles a la temperatura.

- **Diseño acústico de bajo impacto**

Minimice la contaminación sonora en el entorno de laboratorio gracias a un sistema estructural optimizado que mantiene el nivel de ruido por debajo de los 65 dB, incluso en condiciones de funcionamiento a máxima velocidad.

- **Gestión dinámica de ciclos**

Configure con precisión cada etapa operativa mediante 10 rampas programables de aceleración y desaceleración, que permiten adaptar el perfil de centrifugación a los requerimientos específicos de cada aplicación.

- **Motorización de alta eficiencia y bajo mantenimiento**

Equipada con un motor de inducción sin escobillas, esta unidad asegura una operación continua, limpia y sin necesidad de mantenimiento, ideal para bancos de sangre que requieren confiabilidad operativa a largo plazo.

- **Estabilidad mejorada**



La configuración estructural de bajo centro de gravedad proporciona máxima estabilidad mecánica durante la operación, contribuyendo a resultados de centrifugación reproducibles y seguros en todo tipo de cargas.

## Tablero MEMOSOFT V



El tablero **MEMOSOFT V** incorpora, a su reconocida fiabilidad y seguridad, un sistema de comunicación con el usuario mediante pantallas gráficas para la programación y gestión del equipo. Este nuevo sistema permite almacenar automáticamente todas las unidades procesadas y exportación de datos mediante cable, garantizando la máxima trazabilidad en el procesamiento de las unidades de sangre.

Con este sistema de gestión es posible determinar cuándo fue procesada cada unidad de sangre y almacenar todos los datos del ciclo de centrifugación —fecha, hora, método y duración del proceso—, asegurando así un registro completo, trazable y seguro.

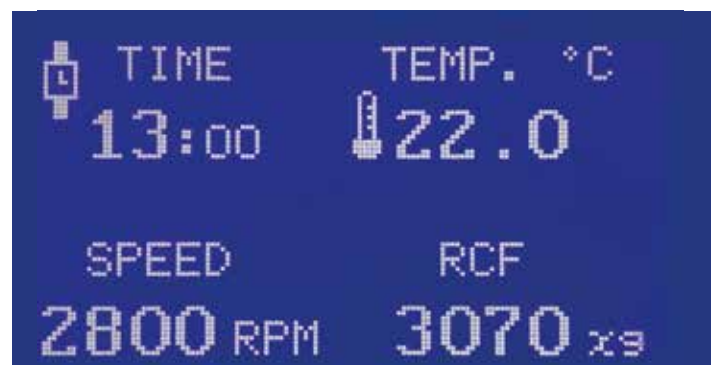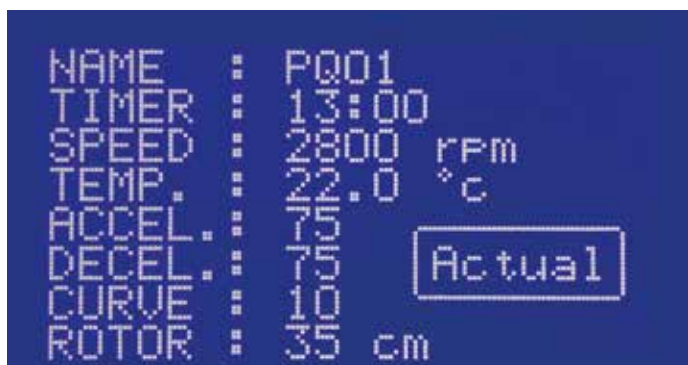



Visualización y Activación de programa



Creación y almacenamiento de programa



Manual



Grupo de usuarios



Configuración de fecha y hora



Tiempo de mantenimiento




Bloqueo pantalla para el usuario



Selección de programa



Borrar programa

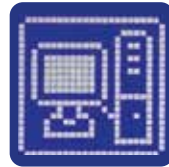

Conexión y transferencia de datos con PC



Habilitación del sistema de almacenamiento de datos



Eliminar base de datos



Tiempo de centrifugacion



Identificación para el usuario

## Descripción de los gráficos del display

```

NAME : P001
TIMER : 13:00
SPEED : 2800 rpm
TEMP. : 22.0 °C
ACCEL. : 75
DECEL. : 75 Actual
CURVE : 10
ROTOR : 35 cm
    
```

Creación manual de programación

Lectura de parámetros con el equipo en funcionamiento

```

TIME : 13:00
TEMP. °C : 22.0
SPEED : 2800 RPM
RCF : 3070 xg
    
```



## Ficha técnica – Modelo DP-2065R PLUS

| Parámetro Técnico                         | Valor                           |
|---|---------------------------------|
| Profundidad                               | 880 mm                          |
| Longitud                                  | 730 mm                          |
| Altura                                    | 1010 mm                         |
| Peso                                      | 207 kg                          |
| Material                                  | Ext: Acero esmaltado Int: Inox. |
| Espacio de mantenimiento                  | No requiere por tener ruedas    |
| Tipo de anclaje o forma de apoyo          | Horizontal ruedas con freno     |
| Consumo eléctrico máximo                  | 15 A (11A en Regimen)           |
| Potencia máxima                           | 3300 VA                         |
| Alimentación                              | 220V +/- 3% 50/60 Hz            |
| Disipación de calor                       | 2500 Kcal / H Max./Ciclo        |
| Temperatura ambiente requerida            | 25 °C                           |
| Refrigerante                              | R404a                           |
| Presión de trabajo                        | 50 psi Succión                  |
| Garantía                                  | 1 año                           |
| Mantenimiento programado según fabricante | 6 meses                         |
| Certificaciones                           | ISO 9001   ISO 13485   ANMAT    |

## Especificacion tecnica rotor 6B oscilante 6 bolsas

| Parámetro Técnico                  | Valor                        |
|------------------------------------|------------------------------|
| Material                           | Acero y Aleacion de aluminio |
| Capacidad de procesamiento         | 6 vasos porta bolsas         |
| Volumen vasos                      | 1000 mL                      |
| Velocidad maxima                   | 3500 RPM                     |
| Temperatura de trabajo programable | Min. 4°C - Max 40°C (+/-)6°C |
| Diametro maximo del rotor          | 520 mm                       |

## Rotores Centrífuga



Rotor 6B

Rotor sin  
bolsas



(R6B)

|            |          |
|------------|----------|
| RPM Maxima | 3500     |
| RCF Maxima | 4198     |
| Capacidad  | 6 Bucket |



Bucket  
(set de 6)



(BU6)

Adaptador  
(set de 6)



(ADA6B)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad Maxima Bucket | 1000 ml Blood Bag    |
| Capacidad Maxima Rotor  | 6 x 1000ml Blood bag |



Rotor de Angulo Fijo

(R6A)

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| RPM Maxima            | 7500             |
| RCF Maxima            | 13376 kg         |
| Capacidad             | 1000 ml x unidad |
| Adaptadores por rotor | 6                |

## Accesorios Opcionales

### Resorte a gas motorizado



Diseñados para mayor seguridad, los resortes a gas motorizados permiten una apertura y cierre suave y controlado de la cámara de la centrífuga, brindando una capa adicional de protección al usuario.



### Lector de código de barras

### Adaptadores para Buffy Coat



Incluye adaptadores específicos para el procesamiento de Buffy Coat, optimizando la separación celular y asegurando resultados confiables y reproducibles. Ideales para aplicaciones clínicas y de investigación que requieren una extracción precisa de componentes celulares.



☎ 11 2488 7703 ✉ [presvac@presvac.net](mailto:presvac@presvac.net)  
🌐 [presvac.net](http://presvac.net)

