



Centrífugas de Laboratorio



DCS-16 RVT PLUS

Calidad ISO 9001/13485

📍 Calle 34 (Ex Francia) N° 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.
☎ +54 11 4755-7780 / 4004 📞 +54 11 2488 7703
🌐 www.presvac.net ✉ presvac@presvac.net





Centrífugas de Laboratorio

DCS-16 RVT PLUS

Versatilidad y precisión para el trabajo diario.

La centrífuga **DCS-16 RVT PLUS** es una solución de mediana capacidad diseñada para laboratorios, centros de investigación y bancos de sangre, ideal para procedimientos de rutina, procedimientos de muestras y pruebas cruzadas.

Su sistema de rotores intercambiables permite adaptarse a distintos tipos de muestras, combinando flexibilidad operativa con resultados confiables.



Operación y programación

La **DCS-16 RVT PLUS** permite programar el tiempo, velocidad, aceleración y el frenado de cada ciclo. Su pantalla LCD muestra en tiempo real la velocidad, RCF, el tiempo transcurrido y el estado del equipo.

El almacenamiento de hasta 50 programas facilita la repetición de procedimientos habituales, reduce los tiempos de configuración y permite mantener condiciones de trabajo consistentes.

Características clave

- Motor libre de mantenimiento
- Pantalla LCD con monitoreo en tiempo real (RCF, velocidad, estado)
- Programación completa de ciclos (tiempo, velocidad, aceleración y frenado)
- Almacenamiento de hasta 50 programas

Control y seguridad

- Alarmas por desbalanceo, tapa abierta y sobrevelocidad
- Sistema de bloqueo de tapa
- Autochequeo del equipo
- Conexión a PC



Procesamiento



Visualización del programa en uso




Selección del programa a utilizar



Creación y almacenamiento



Eliminación de programas en memoria

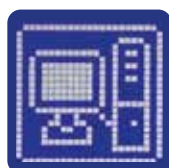

Conexión y transferencia de datos a PC



Habilitación del sistema de almacenamiento de datos



Visualización de fecha y hora

ROTORES INTERCAMBIABLES

Tipo	Modelo	Capacidad	Compatible con adaptadores 5 o 8 ml
 Oscilante Swing Bucket 3500 RPM	CP-16	16 x 15 ml	Si
	CP-24	24 x 15 ml	Si
	CP-6/50	6 x 50 ml	No
	CP-4/50	4 x 50 ml	No
 Angular Fixed angle rotor 5000 RPM	CF-36	36 x 8 ml	No
	CF-24	24 x 15 ml	Si
	CF-16	16 x 15 ml	Si
	CF-12	12 x 15 ml	Si
	CF-6	6 x 15 ml	Si



☎ +54 11 2488 7703 ✉ presvac@presvac.net
🌐 presvac.net

